

LV

EP.V.34170.00 | 09/2023

asecos®



UB LINE K LINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Apsauginės spintelės pagal DIN EN 14470-1


5 METŲ GARANTIJA

Sudarę „BASICPlus“ sutartį su 5 metų nustatytu terminu, gaunate 5 metų garantiją pasirinktai saugos spintai. Daugiau informacijos apie mūsų garantines paslaugas galite rasti:







UB-S-90

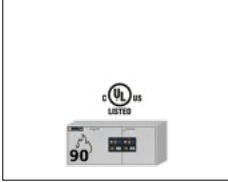


UB90.060.140.2S
UB90.060.140.UL.2S
UB90.060.140.050.2S
UB90.060.140.050.UL.2S

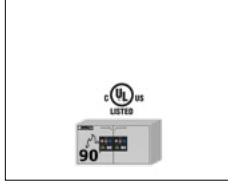


UB90.060.110.2S
UB90.060.110.UL.2S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.UL.2S
UB90.080.110.060.2S

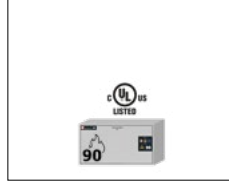

UB90.060.110.S
UB90.060.110.UL.S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.050.UL.S

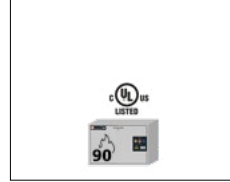


UB90.060.089.S
UB90.060.089.UL.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.050.UL.S

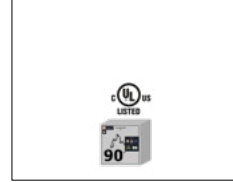


UB90.060.059.S
UB90.060.059.UL.S
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.050.UL.S
UB90.080.059.060.S


UB-T-90

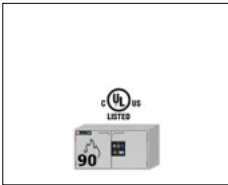

UB90.060.110.2T
UB90.060.110.UL.2T
UB90.060.110.050.2T
UB90.060.110.050.UL.2T
UB90.080.110.060.2T
UB90.080.110.075.2T

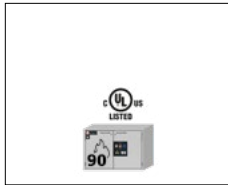


UB90.060.089.2T
UB90.060.089.UL.2T
UB90.060.089.050.2T
UB90.060.089.050.UL.2T

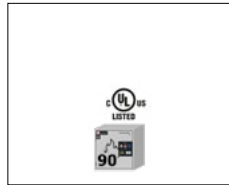


UB90.060.059.T
UB90.060.059.TR
UB90.060.059.UL.T
UB90.060.059.UL.TR
UB90.060.059.050.T
UB90.060.059.050.TR
UB90.060.059.050.UL.T
UB90.060.059.050.UL.TR
UB90.080.059.060.T
UB90.080.059.060.TR

UB-ST-90

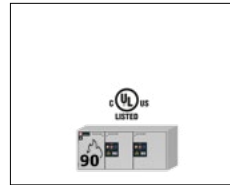


UB90.060.140.S2T
UB90.060.140.UL.S2T
UB90.060.140.050.S2T
UB90.060.140.050.UL.S2T

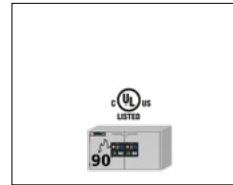


UB90.060.110.ST
UB90.060.110.UL.ST
UB90.060.110.050.ST
UB90.060.110.050.UL.ST


UB-S-30

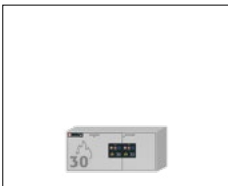


UB30.060.140.2S

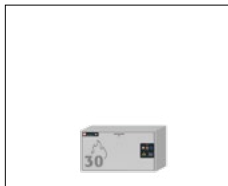


UB30.060.110.S

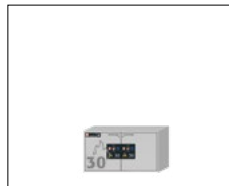

UB30.060.110.2S

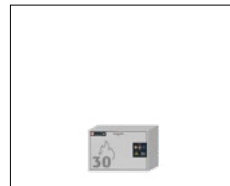

UB30.060.089.S

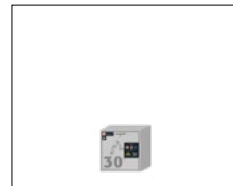

UB30.060.059.S

UB-T-30




UB30.060.110.2T




UB30.060.059.T


K-UB-90

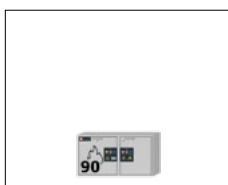


K90.060.110.050.UB.ST

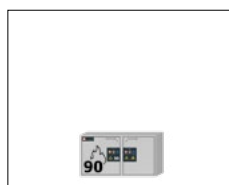

K90.060.110.050.UB.2T

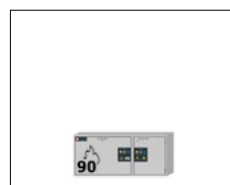

K90.060.140.050.UB.ST

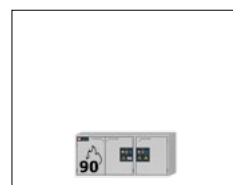

K90.060.140.050.UB.3T



„asecos GmbH“

Klientų aptarnavimo skyrius
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Gründau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. paštas: service asecos.com

Jūsų asmeniniai dokumentai, susiję su „asecos“ saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jūs įsigijote „asecos“ saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Pristatome jums naujovišką gaminį, pagamintą iš aukštos kokybės medžiagų ir garantuojantį aukščiausią kokybę.

„asecos“ saugos spintos turi išsamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje ar pan.) paprašysite jų iš mūsų naudodamiesi šia forma.

Tiesiog paimekite (nukopijuokite) šią formą ir atsiųskite mums ją faksu, nurodydami savo adresą ir spintos serijos numerį.

Pagarbiai
„asecos GmbH“

Kontaktai

Įmonės pavadinimas

Gatvė

Pašto kodas

Vieta

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

El. paštas

Telefonas

Saugos spintų serijos numeriai

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Mūsų saugos spintos leidžia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medžiagas darbo vietoje.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsamiai susipažinkite su mūsų saugos spintų privalumais ir patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienį pavojingų medžiagų tvarkymą.



Dėkojame
Jūsų „asecos“ komanda

1. NURODYMAI • DIREKTYVOS • GARANTIJA	5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai	5
1.2. Garantija	5
1.3. Informacija apie spintą	5
1.4. Ženklėjimas ir simboliai ant spintos	5
2. TRANSPORTAS	6
2.1. Spintos apvertimas	6
3. ĮRENGIMAS • EKSPLOATAVIMAS • VEIKIMAS	6
3.1. Spintų išlyginimas	6
3.2. Mobilus cokolis	7
3.3. Eksploatavimas	7
3.4. Apsaugos nuo pasvirimo įtaisas	7
4. UŽDARYMO MECHANIZMAI	8
4.1. Uždarymo rūšys	8
4.2. Užraktas	8
5. VIDAUS ĮRANGA	8
5.1. Apatinis surinkimo padėklas / stalčiuje įmontuotas surinkimo padėklas	8
5.2. Perforuoto lakšto įdėklas	9
5.3. Lentynos (modeliai su dviem durelėmis)	9
5.4. Ištraukiami padėklai (modeliai su dviem durelėmis)	9
5.5. Antroji ištraukiama lentyna (modeliai su stalčiais)	9
5.6. Ištraukiamos lentynos (K-LINE modeliai)	10
5.7. Nuotėkis	10
6. SANDĖLIAVIMAS	11
6.1. UB-LINE modelis	11
6.2. K-UB-90 modelis	11
7. ĮŽEMINIMAS	11
7.1. Įžeminimas PREMIUM	12
7.2. Vidaus komponentų įžeminimas	12
8. VĖDINIMO SISTEMA	12
8.1. Bendrieji nurodymai	12
8.2. Prijungimas prie techninės ventiliacijos	12
9. GAISRO ATVEJIS • ŠALINIMAS	12
9.1. Spintos atidarymas po gaisro	12
9.2. Šalinimas	13
10. SAUGOS PATIKRINIMAS	13
10.1. Bendra informacija	13
10.2. Nusidėvinčios dalys	13
11. TECHNINIS BRĖŽINYS	14
12. TECHNINIAI DUOMENYS	15
12.1. Lentelė „Techniniai duomenys“	15
12.2. Lentelė „Saugyklos talpa“	16

1.1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Laikykitės pavojingų medžiagų tvarkymui taikomų įstatymų ir teisės aktų bei šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
- Elektros sistemos darbus atjungus elektros įtampą turi atlikti kvalifikuoti elektrikai – taip pat žr. galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatas, VDE nuostatas ir vietinio energijos tiekėjo taisykles.
- Būtina laikytis montavimo vietoje sąlygų (pvz., tvirtinti spintas prie pastato varžtais).
- Būtina laikytis techninio prižiūrėtojo nurodymų.
- Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų ir darbo vietos direktyvų.
- Užtikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus **atliktų tik įgalioti specialistai** naudodami **originalias atsargines dalis**.
- Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pašaliniais asmenims turi būti uždrausta prieiga prie spintos.
- Durų varstymo erdvė visada turi būti laisva, durys ir (arba) stalčiai turi būti uždaryti.
- Apmokytų ir (arba) įgaliotų specialistų pagalba išvengsite gedimų, pažeidimų ir korozijos, kurie gali atsirasti dėl netinkamo transportavimo.
- Laikykitės didžiausių leistinų sandėliavimo kiekių ribų, apkrovų ir t. t.
- Negalima statyti didesnių indų, nei telpa į apatinį surinkimo padėklą; išbėgusios pavojingos medžiagos turi būti nedelsiant surinktos ir pašalintos.
- Prieš naudojimą ir (arba) laikymą patikrinkite spintos paviršiaus / vidaus komponentų atsparumą cheminei medžiagai.
- Talpyklos su agresyviomis cheminėmis medžiagomis (rūgštims ir šarmais) turi būti dedamos į specialias rūgščių ir šarmų spintas arba rūgščių ir šarmų skyrius.
- Prieš pirmą kartą pradėdamas naudoti saugos spintą, naudotojas turi apžiūrėti, ar ji nėra pažeista.
- Siekiant išvengti sprogių atmosferų ir kenksmingų garų, primygtinai rekomenduojama užtikrinti pakankamą techninę ventiliaciją. Laikykitės nurodymų dėl prijungimo prie ištraukiamojo oro sistemos.

Montavimas ir aplinkos sąlygos

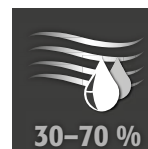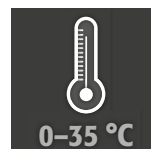

1.2. GARANTIJA

Dėl šio gaminio garantijos susitarėte jūs (klientas) ir jūsų specializuotas prekybos atstovas (pardavėjas). „asecos“, kaip gamintojas, suteikia 24 mėnesių garantiją naudojimo instrukcijoje išvardytiems gaminiams nuo pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius įrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo įgalioti specialistai. Priešingu atveju kliento garantinė pretenzija gamintojui negalioja.

1.3. INFORMACIJA APIE SPINTĄ

Išsamią modelio apžvalgą rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

Spintos duomenys: žurnalas (pridedamas prie spintos)

Techninis brėžinys: priedas

Techniniai duomenys: lentelė priede

UB-LINE

Šie modeliai išbandyti, sertifikuoti ir paženklinėti pagal DIN EN 14470-1 reikalavimus.

- Modeliai UB30 – atsparumas ugniai: 30 minučių
 - Modeliai UB90 – atsparumas ugniai: 90 minučių
 - Modeliai UB90 su UL žyma – papildomai išbandyti, sertifikuoti ir pažymėti pagal UL(C) 1275 reikalavimus
- Visos spintos naudojamos nustatytam, pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose pagal galiojančias nacionalines taisykles.

K-UB-LINE

Kairėje pusėje esantys spintos skyriai skirti nustatytam, pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose pagal galiojančias nacionalines taisykles. Jie išbandyti, sertifikuoti ir paženklinėti pagal DIN EN 14470-1 reikalavimus. Dešinėje pusėje esantys spintos skyriai skirti atskiram agresyvių, nedegių pavojingų medžiagų (pvz., rūgščių ir šarmų) laikymui.

1.4. ŽENKLINIMAS IR SIMBOLIAI ANT SPINTOS

Ant spintos pritvirtinti įvairūs lipdukai su skirtingais simboliais. Toliau pateikiami atskirų ženklų ir iliustracijų paaiškinimai.



1 Draudimo ženklas: draudžiama naudoti atvirą liepsną; draudžiama naudoti ugnį, atvirą uždegimo šaltinį ir rūkyti



2 Įsakymo ženklas: būtina laikytis instrukcijų




3 Įsakymo ženklas: būtina laikyti uždarytas duris



4 Rekomendacija: rekomenduojama prijungti prie techninės vėdinimo sistemos.


2. TRANSPORTAS

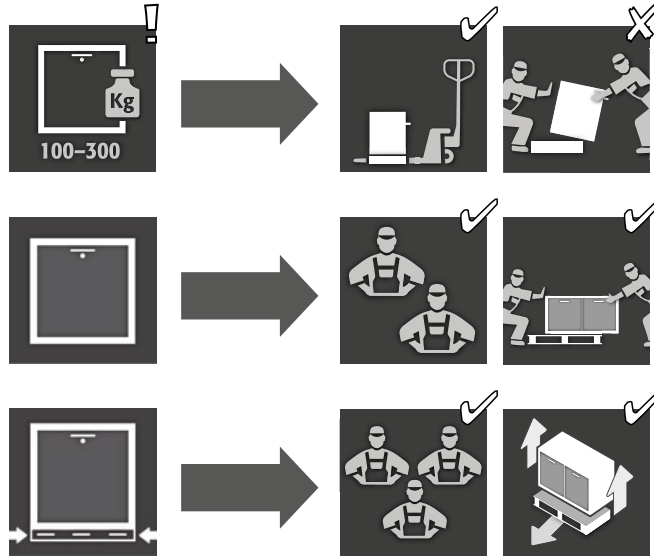

DĖMESIO:


Į galutinę montavimo vietą spintą transportuokite vertikaliai su priištu ir nuo slydimo apsaugotu krautuvu. Transportavimo fiksatorius, esančius durų jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje.! Dėl netinkamo transportavimo gali būti paslėptai pažeista priešgaisrinė izoliacija! Galime užtikrinti reikiamą kokybę tik tuo atveju, jei spintą į naudojimo vietą transportuoja mūsų specialiai apmokyti darbuotojai.

2.1. SPINTOS APVERTIMAS

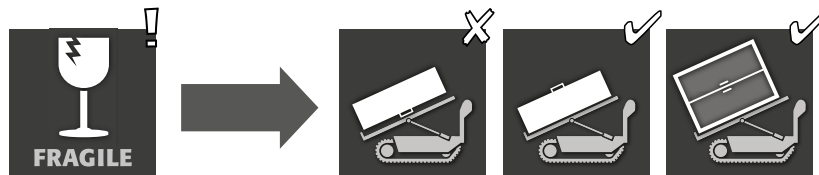

3. ĮRENGIMAS - EKSPLOATAVIMAS - VEIKIMAS

3.1. SPINTŲ IŠLYGINIMAS

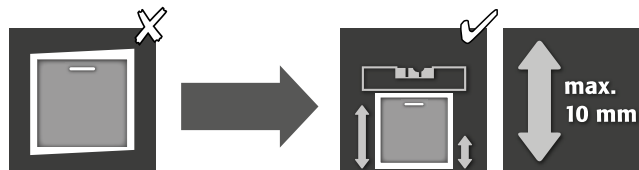





DĖMESIO

Jei atstumas tarp durų ir stalčiaus yra didesnis nei 40 mm ir mažesnis nei 120 mm, galima naudoti atitinkamas durų / stalčių plokštes, kad būtų išvengta galimo pėdų prispaudimo pavojaus. Prie spintos modelio darančių plokščių galima nemokamai užsisakyti adresu: service@asecos.com.



DĖMESIO:

Durų ir stalčiaus elementai atidarant ir uždarant neturi trintis į priešgaisrinius sandariklius durelėse ir stalčiaus griovelyje!

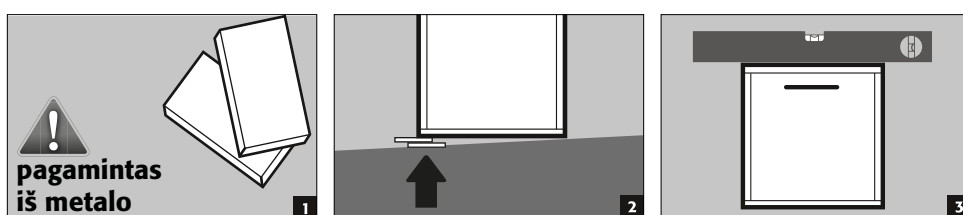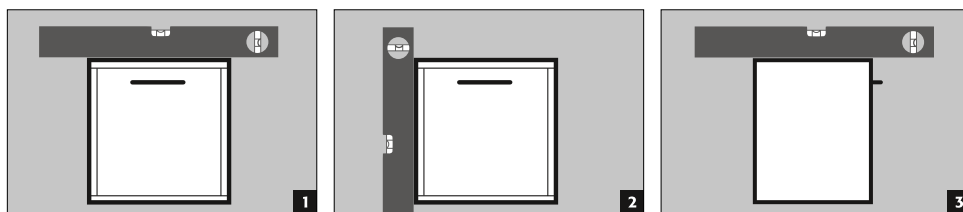

DĖMESIO:


Modeliams su mobiliu cokoliu tai reikia nustatyti iš anksto. Tik tada galima sureguliuoti spintas.

3.2. MOBILUS COKOLIS



DĖMESIO

Jei atstumas tarp durų ir stalčiaus yra didesnis nei 40 mm ir mažesnis nei 120 mm, galima naudoti atitinkamas durų / stalčių plokštes, kad būtų išvengta galimo pėdų prispaudimo pavojaus. Prie spintos modelio darančių plokščių galima nemokamai užsisakyti adresu: service@asecos.com.

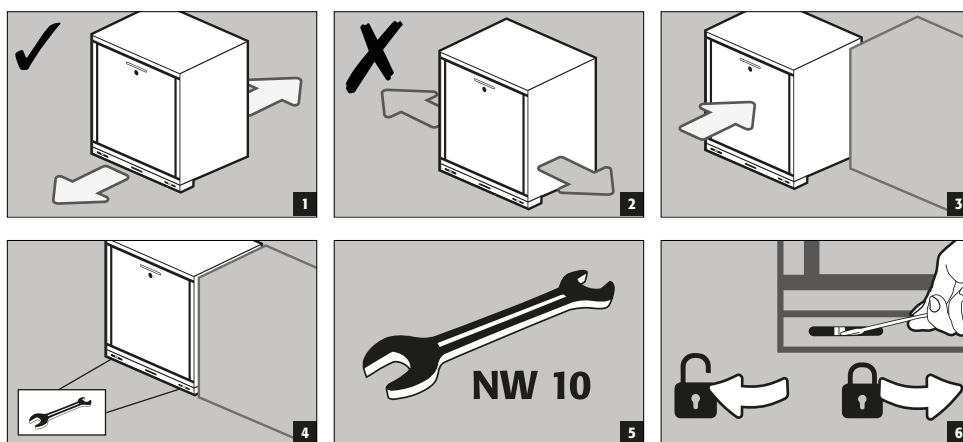


3.3. EKSPLOATAVIMAS

Prieš pradėdamas naudoti saugos spintą pirmą kartą, naudotojas turi patikrinti, ar ji nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra sugedusių ar atsiskyrusių sandarinimo elementų, ar durų elementai (vyriai, užraktų sistemos, jei taikoma, durų pritraukimo mechanizmai ir durų atidarymo ribotuvas) teisingai sureguliuoti ir tinkamai veikia. Spintą ir priedus naudokite tik tada, jei jie yra tinkamos būklės.

3.4. APSAUGOS NUO PASVIRIMO ĮTAISAS

Apsauginis laikiklis (EP.ML.6323):


Apsauga nuo apvirtimo esant maksimaliai apkrovai ir visiškai ištraukiamiems stalčiams (pasirinktinai)

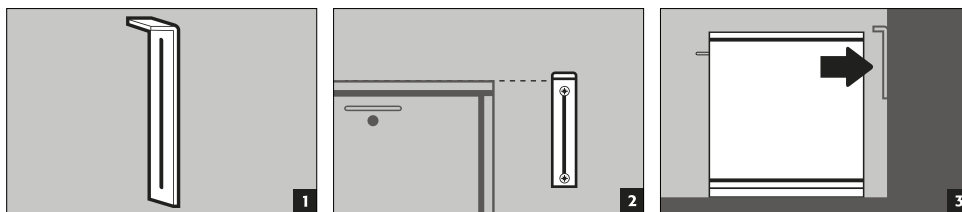


4. UŽDARYMO MECHANIZMAI

4.1. UŽDARYMO RŪŠYS

UB-LINE

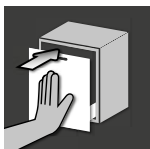

Įprastas naudojimas:
stalčiai / durys atidaromi ir
uždaromi rankomis

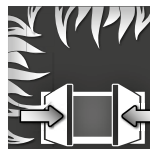


Gaisro atvejis: šiluminio
paleidimo įtaisas, atidaryti
stalčiai / durys užsidaro
automatiškai

K-UB-90



Įprastas naudojimas:
stalčiai / durys atidaromi
ir uždaromi rankomis (abu
laikymo skyriai)

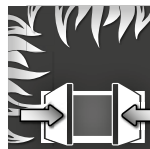

Gaisro atvejis: šiluminio
paleidimo įtaisas, atidaryti
stalčiai / durys užsidaro
automatiškai (degiųjų
skysčių laikymo skyrius)



DĖMESIO:

Jei degių skysčių laikymo skyrių stalčiai / durys nebeužsifiksuoja bet kokiaje padėtyje, vadinasi suveikė šiluminio paleidimo įtaiso lydžioji jungė. Spintos fiksavimo funkcija turi būti nedelsiant visiškai sutvarkyta, kad gaisro atveju būtų išvengta gedimų.

4.2. UŽRAKTAS



DĖMESIO:

DĖMESIO: jei nesuteikiama prieiga prie spintos turinio, savininkas ir (arba) naudotojas turi užtikrinti, kad visos durys ir visi stalčiai būtų uždaryti.

Visi modeliai



Cilindrinė spyna
su uždarymo būseną
rodančiu ekranu


5. VIDAUS ĮRANGA



DĖMESIO:

Laisvosios dalys (pvz., įdedami padėklai) visada turi būti iki galo sumontuotos ir (arba) įdėtos, kad kilus gaisrui būtų užtikrintas saugus spintos durelių uždarymas.

5.1. APATINIS SURINKIMO PADĖKLAS / STALČIUJE ĮMONTUOTAS SURINKIMO PADĖKLAS

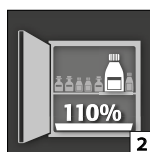


Pagal EN 14470-1:į apatinį / stalčiaus surinkimo padėklą turi būti surenkama ne mažiau kaip 10 % visų spintoje laikomų talpyklų tūrio [1], arba ne mažiau kaip 110 % didžiausios atskiros talpyklos tūrio [2], atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis.

Saugos spintų surinkimo padėklai yra išbandyti ir sertifikuoti kaip nurodyta toliau

- Surinkimo padėklai, pagaminti iš lakštinio plieno arba nerūdijančio plieno pagal „StawaR - TÜV Süd“ (pristaty-


- mas į Vokietiją, Austriją ir Šveicariją
- Surinkimo padėklas iš plastiko (PP), patvirtintas Berlyno statybos tarnybos „DIBt Berlin“ (nepriklausomai nuo šalies)

5.2. PERFORUOTO LAKŠTO ĮDĖKLAS

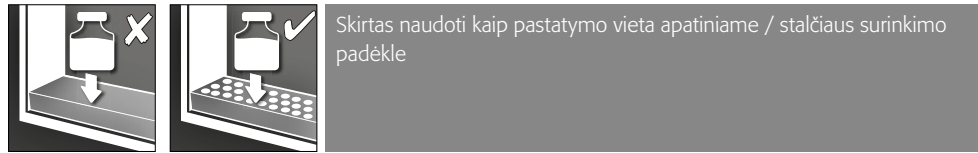

5.3. LENTYNOS (MODELIAI SU DVIEM DURELĖMIS)

- Papildoma saugojimo vieta spintoje
- Montuojamas spintoje fiksuotoje padėtyje
- Pritvirtinamas prie šoninių sienelių, kad neapvirėtų ir nebūtų ištrauktas

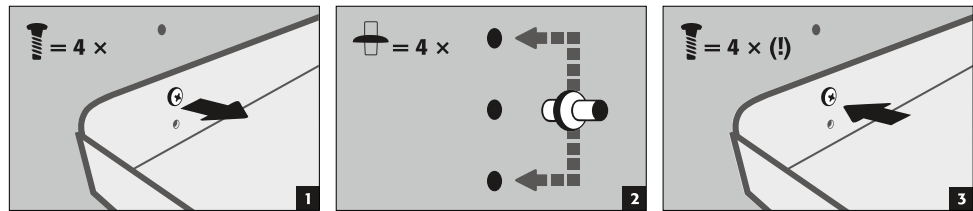


5.4. IŠTRAUKIAMAI PADĖKLAI (MODELIAI SU DVIEM DURELĖMIS)


Didelėms (iki 30 litrų), maksimalaus reguliuojamo aukščio talpykloms spintelėje laikyti

- **Įprastas naudojimas:** rankomis ištraukite ištraukiamą padėklą iš spintos ir vėl jį įstumkite atgal
- **Gaisro atvejis:** šiluminio paleidimo įtaisas, ištrauktas ištraukiamasis padėklas automatiškai įtraukiamas į spintą

Įprastinio veikimo režimas

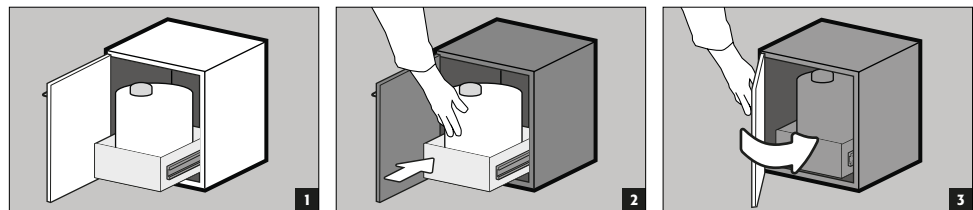

Gaisro atvejis

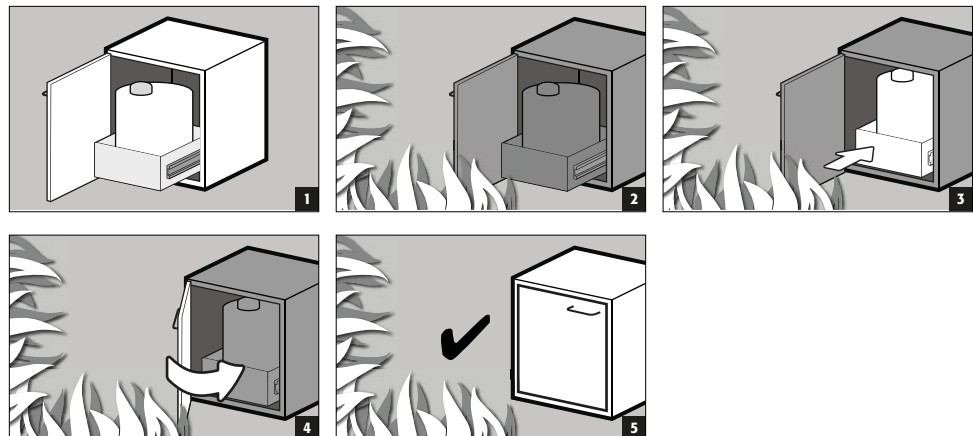


5.5. ANTROJI IŠTRAUKIAMA LENTYNA (MODELIAI SU STALČIAIS)


Skirtas laikyti talpyklas, kurių aukštis ne didesnis kaip 230 mm

- **Įprastas naudojimas:** rankomis ištraukite antrąją ištraukiamą lentyną iš spintos ir vėl ją įstumkite atgal
- **Gaisro atveju:** šiluminio paleidimo įtaisas, antroji ištraukiamą lentyna automatiškai įtraukiama į spintą, kai stalčius užsidaro

Įprastinio veikimo režimas

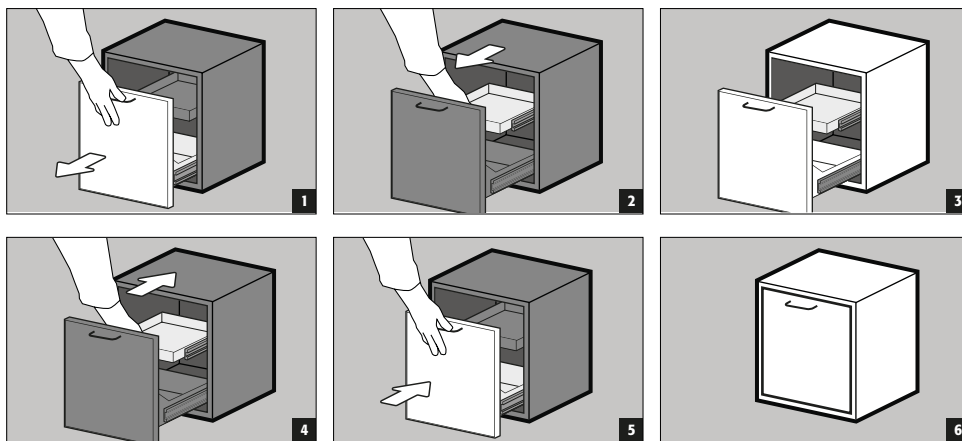


Gaisro atvejis

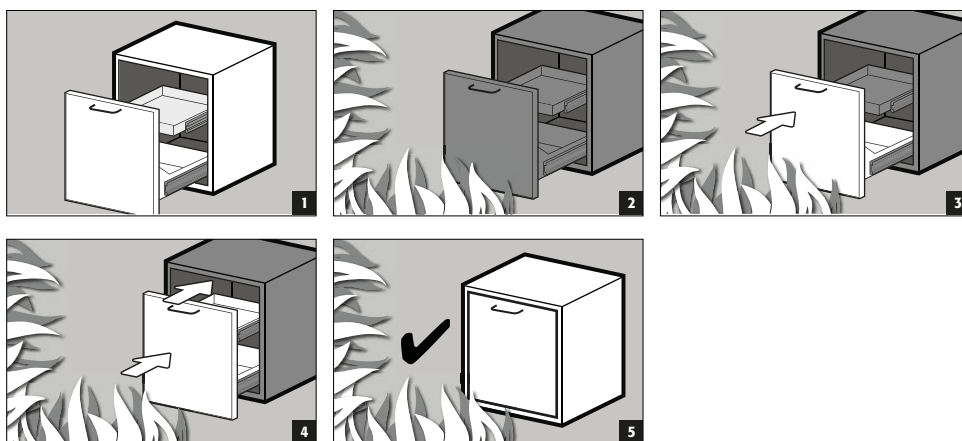

5.6. IŠTRAUKIAMOS LENTYNOS (K-LINE MODELIAI)

Dešinėje pusėje esantis skyrius (skirtas nedegioms pavojingoms medžiagoms, pvz., rūgštims ir šarmams)

- Ištraukiamos lentynos yra tvirtai įmontuotos į spintą ir turi apsaugą nuo ištraukimo.
- Po naudojimo juos reikia rankomis įstumti į spintą.
- Spintos su ištraukiamomis lentynomis turi būti pritvirtintos prie sienos apsauginiais įtaisais nuo apvirtimo!

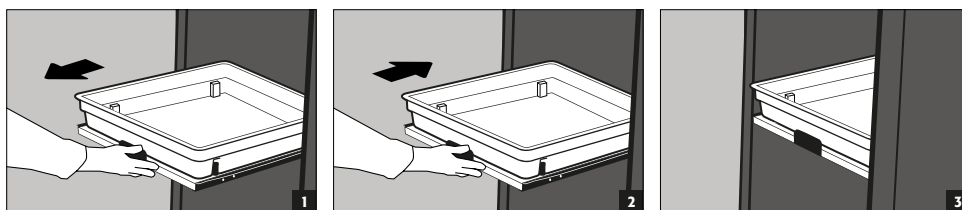


5.7. NUOTĖKIS




NURODYMAS

Skystis, patekęs į apatinį / stalčių / ištraukiamą padėklą ir į ištraukiamos lentynos padėklą, turi būti sugeriamas nedelsiant ir tinkamomis priemonėmis. Priemonės pasirenkamos savarankiškai, atsižvelgiant į išsiliejusių cheminių medžiagų.


Apatinis surinkimo padėklas

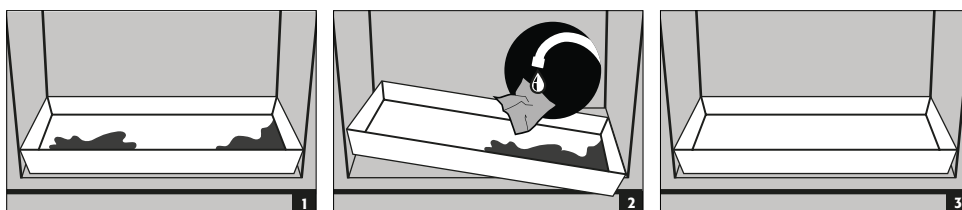

Stalčiaus surinkimo padėklas

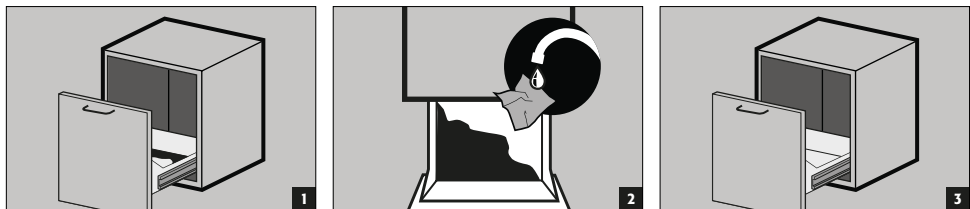

Ištraukiamas dėklas

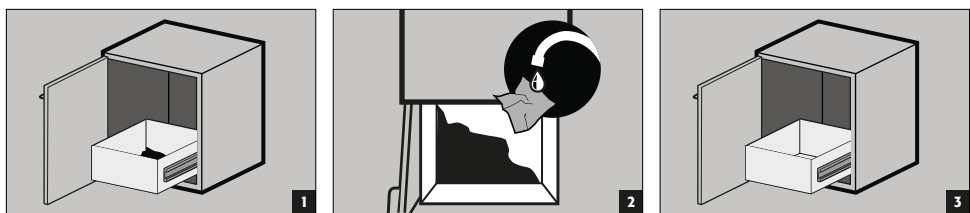

Lentynos ištraukimas



6. SANDĖLIAVIMAS



Galioja visiems modeliams Atsižvelgiant į spintos tipo klasę, laikykitės galiojančių nacionalinių taisyklių!

6.1. UB-LINE MODELIS

Pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose

- Talpyklos su agresyviomis cheminėmis medžiagomis (rūgštimis ir šarmais) turi būti dedamos į specialias rūgščių ir šarmų spintas arba rūgščių ir šarmų skyrius.



DĖMESIO:
Laikomi koroziją sukeltantys skysčiai gali pabloginti tiekiamo ir ištraukiamo oro uždarymo įtaisų veikimą gaisro atveju.

6.2. K-UB-90 MODELIS

- **Kairėje esantys skyriai** skirti pasyviai degių skysčių laikymui darbo patalpose
- **Dešinėje esantys skyriai** skirti pasyviai nedegių, agresyvių cheminių medžiagų (pvz., rūgščių ir šarmų) laikymui




DĖMESIO:
Kairiajame skyriuje laikomi koroziniai skysčiai gali turėti neigiamos įtakos šių įtaisų – tiekiamo ir šalinamo oro uždarymas – savaiminis uždarymas gaisro atveju funkcionavimui.

7. ĮŽEMINIMAS



Priklausomai nuo konkretaus kliento saugos spintos naudojimo, gali prireikti įžeminimo jungties. Atitinkamas sprendimas priimamas atlikus kliento rizikos vertinimą.

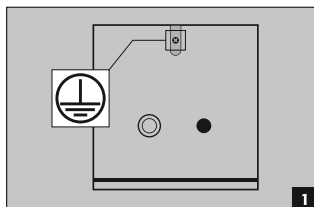

UB-Line ir K-UB-90 modeliai turi žeminimo jungtį galiniame skydelyje. Spintos korpusas (šoninės ir viršutinės plokštės) metaliniu laidumu tarpusavyje sujungtos žeminimo jungtimi. Žeminimo jungtis yra paruošta, kad vietoje būtų galima įrengti lygiavertį potencialų sujungimą.

7.1. ĮŽEMINIMAS PREMIUM

Galima įsigyti tik kartu su gamykloje montuojama spinta.

Pasirinktinai už papildomą mokestį spintos gali būti įrengtos kaip nurodyta toliau:

- Papildoma metalinė laidų jungiamoji detalė durims (stalčiams), durų rankenoms ir grindjuostei sujungti su korpusu
- UB-LINE / K-UB-90 modeliai su dviem durimis: prekės Nr. 39793 (HFE.34360)
- UB-LINE / K-UB-90 modeliai su dviem durimis: prekės Nr. 39796 (HFE.34367)

7.2. VIDAUS KOMPONENTŲ ĮŽEMINIMAS

Pasirinktinai spintos gali būti komplektuojamos su

- Įžeminimo laidu (L=1100 mm), įskaitant gnybtą-krokodilą – prekės Nr. 31710 (HFE.12704) arba
 - Įžeminimo laidu (L=1100 mm), įskaitant polių gnybtą – prekės Nr. 39148 (HFE.12704).
- Įžeminimo laidas prijungiamas viduje prie žeminimo jungties galinėje spintos sienelėje

8. VĖDINIMO SISTEMA



NURODYMAI

Priešgaisriniai vožtuvai, esantys ištraukiamo ir tiekiamo oro jungčių srityje, yra saugos ir techninės priežiūros reikalaujantys komponentai.

Laikant koroziją sukeliančias pavojingas medžiagas gali sutrikti tiekiamo ir ištraukiamo oro uždarymo įtaisų veikimas. Kad būtų galima patikrinti tinkamą veikimą arba pakeisti sugedusį elementą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jungiant prie ištraukiamojo oro sistemos būtų naudojamos lanksčios jungiamosios žarnos arba stumdomos dalys, kad ištraukiamojo oro jungtį būtų galima lengvai išmontuoti ir vėl sumontuoti.

8.1. BENDRIEJI NURODYMAI


- Jei įrengti, reikia patikrinti, ar tinkamai prijungti prie vėdinimo sistemos (pvz., naudojant dūmų vamzdelį).

8.2. PRIJUNGIMAS PRIE TECHNINĖS VENTILIACIJOS



Iš esmės šiuos modelius galima eksploatuoti be techninio vėdinimo, tačiau tiesioginė spintos aplinka gali tapti potencialiai sprogia zona. Naudotojas turi pritvirtinti prie spintos etiketę, jei ji bus eksploatuojama be ištraukiamojo oro jungties.

ORO ŠALINIMAS (a)
ORO ŠALINIMAS (b)
2 pav. Spinta su cokoliu
3 pav. Spinta be cokolio

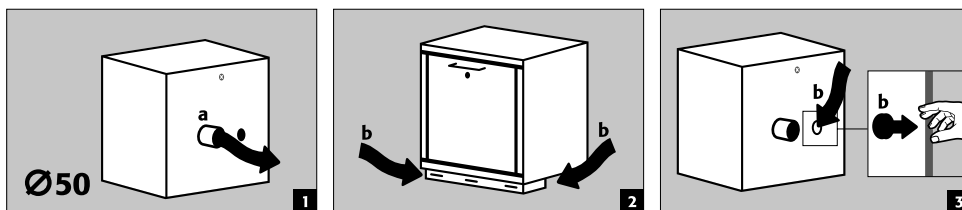

- Visus modelius galima prijungti prie techninės ištraukiamojo oro sistemos per ištraukiamojo oro antgalį. Oro apykaita, maksimalus slėgių skirtumas ir išmetamojo oro ortakai nurodyti galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose.

9. GAISRO ATVEJIS - ŠALINIMAS

9.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO



**DĖMESIO:****Spintą gali atidaryti tik įgalioti darbuotojai (pvz., ugniagesiai)!**

Priklausomai nuo gaisro trukmės, gali susidaryti degus garų ir oro mišinys, todėl prieš atidarydami spintas pašalinkite visus uždegimo šaltinius 10 metrų spinduliu nuo spintos.

Naudokite tik nekibirkščiuojančius įrankius!

Labai atsargiai atidarykite spintas!

9.2. ŠALINIMAS



Modelius galima išardyti ir rūšiuoti, kad juos būtų galima utilizuoti.

10. SAUGOS PATIKRINIMAS

10.1. BENDRA INFORMACIJA

Spintos, kaip su sauga susiję įrenginiai, turi būti tikrinamos bent kartą per metus (pagal Darbo vietų reglamento 4 straipsnio 3 dalį, Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnį ir Darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos taisyklę DGUV-R 108-007). Kito patikros terminą rasite patikrinimo lipduke, esančiame išorinėje durų pusėje. Šią metinę patikrą gali atlikti tik įgaliotas „asecos“ darbuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo reikalavimų ir siekdamas užtikrinti jūsų garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat žr. mūsų techninio aptarnavimo brošiūrą).

Be to, rekomenduojame patiems kasdien ir kas mėnesį atlikti veikimo patikrą:

Kasdienė veikimo patikra

- turėtų būti taikoma surinkimo padėklams (užfiksuoti ir pašalinti visus galimus nuotėkius).

Mėnesinė veikimo patikra

- nepriekaištingas durų veikimas:
 - vyriai
 - užraktų sistemos
 - durų pritraukimo mechanizmai
 - durų atidarymo ribotuvai
- tinkamas priešgaisrinių sandariklių vieta ir būklė

Valymas

Spintas galima valyti švelniu buitiniu valikliu ir minkšta šluoste.

Gedimo atvejis

Gedimo atveju kreipkitės į „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybą arba specializuotą prekybos atstovą, kad spinta būtų suremontuota naudojant originalias dalis.

10.2. NUSIDĖVINČIOS DALYS

Įvairūs su sauga susiję saugos spintos komponentai yra nusidėvinčios dalys ir turi būti reguliariai keičiamos „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybos.


Saugos spintos dalių sąrašą galima gauti pateikus užklausą: service@asecos.com.

**KONTAKTAI**

Jei nustatėte defektų ar turite skundą dėl mūsų gaminių (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpį, tiek jam pasibaigus), norėdami paprašyti atlikti saugos patikrinimą arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartį, kreipkitės į mūsų aptarnavimo karštąją liniją adresu:


Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

11. TECHNINIS BRĖŽINYS

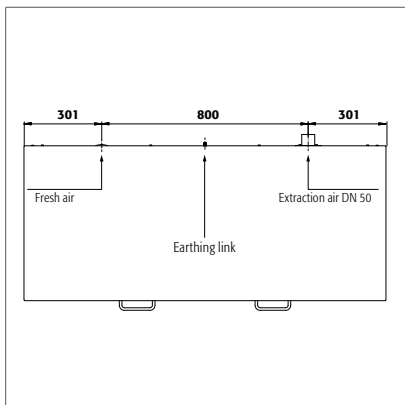


UB90.060.140.2S
UB90.060.140.050.2S
UB90.060.140.S2T
UB90.060.140.050.S2T
UB30.060.140.2S

UB90.060.140.UL.2S
UB90.060.140.050.UL.2S
UB90.060.140.UL.S2T
UB90.060.140.050.UL.S2T

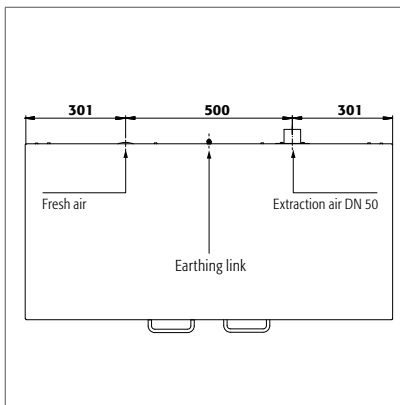


UB90.060.110.2S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2T
UB90.060.110.050.2T
UB90.060.110.ST
UB90.060.110.050.ST
UB30.060.110.S
UB30.060.110.2S
UB90.080.110.060.2S

UB90.060.110.UL.2S
UB90.060.110.050.UL.2S
UB90.060.110.UL.S
UB90.060.110.050.UL.S
UB90.060.110.UL.2T
UB90.060.110.050.UL.2T
UB90.060.110.UL.ST
UB90.060.110.050.UL.ST
UB30.060.110.2T
UB90.080.110.060.2T
UB90.080.110.050.2T

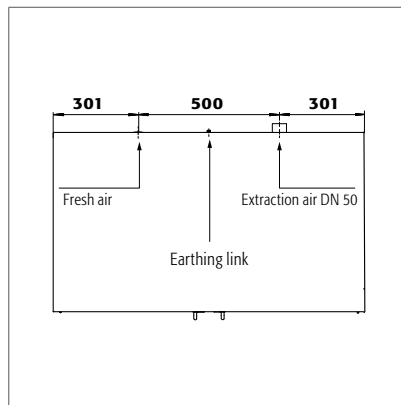


UB90.080.110.075.2T

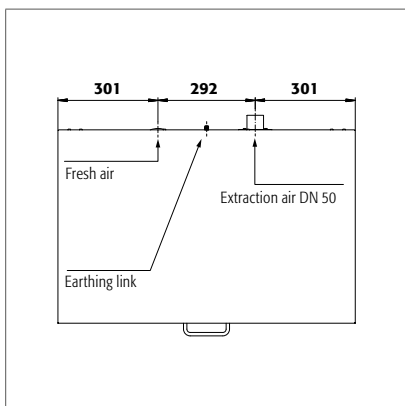


UB90.060.089.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.2T
UB90.060.089.050.2T
UB30.060.089.S

UB90.060.089.UL.S
UB90.060.089.050.UL.S
UB90.060.089.UL.2T
UB90.060.089.050.UL.2T

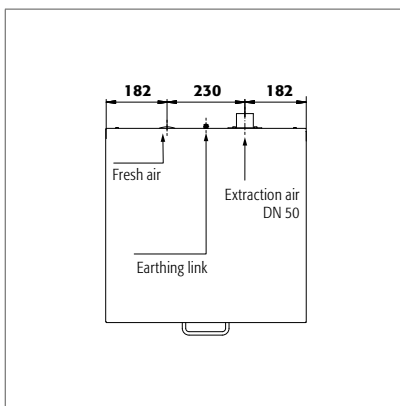


UB90.060.059.S
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.T
UB90.060.059.UL.T
UB90.060.059.050.T
UB90.060.059.050.UL.T
UB30.060.059.T
UB90.080.059.060.T
UB90.080.059.060.S

UB90.060.059.UL.S
UB90.060.059.050.UL.S
UB90.060.059.TR
UB90.060.059.UL.TR
UB90.060.059.050.TR
UB90.060.059.050.UL.TR
UB30.060.059.S
UB90.080.059.060.T
UB90.080.059.060.TR

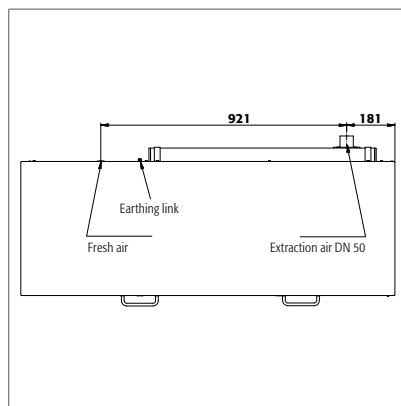

K90.060.140.050.UB.ST

K90.060.140.050.UB.3T

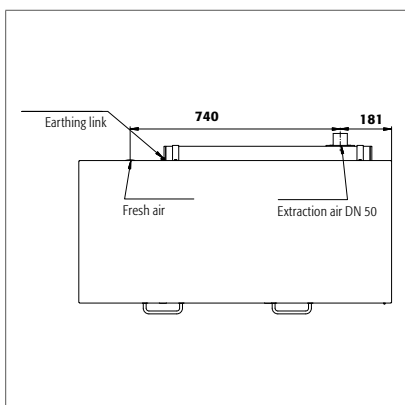

K90.060.110.050.UB.ST

K90.060.110.050.UB.2T

12.1. LENTELĖ „TECHNINIAI DUOMENYS“

Ploto apkrova nustatoma pagal visą spintos svorį (tuščia spinta ir apkrova) padalijus iš naudojamo ploto. Ji apskaičiuojamas spintos plotį padauginus iš gylio (spintos gylio ir 1 000 mm ploto priešais ją suma). Naudojimo instrukcijoje nurodyta ploto apkrova yra teorinė vertė, nes nurodyta apkrova yra didžiausia leistina spintos konstrukcijos vertė. Apskaičiuojant individualią ploto apkrovą visada turi būti atsižvelgiama į faktinę apkrovą (vidaus komponentų svorį ir sandėliuojamų talpyklų svorį).

Teorinės ploto apkrovos skaičiavimo modelio UB90.060.110.2T PAVYZDYS:

Spintos svoris:	180 kg
Apkrova	300 kg
Įtraukimo plotas:	1100 mm × (574+1000) mm
Apskaičiavimas:	$\frac{180+300 \text{ kg}}{1,1 \text{ m} \times 1,574 \text{ m}} = \frac{480 \text{ kg}}{1,731 \text{ m}^2} = 277 \text{ kg/m}^2$

Lentelės „Techniniai duomenys“ paaiškinimai

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Išoriniai matmenys P x G x A | 5 Didžiausia apkrova (kg) |
| 2 Vidiniai matmenys P x G x A | 6 Ploto apkrova (kg/m ²) |
| 3 Tipu klasė | 7 Tūris esant 10 kartų oro apykaitai (m ³ /h) |
| 4 Bendras svoris be apkrovos (kg) | 8 Diferencinis slėgis pasikeitus oro kiekiui 10 kartų EK5/AK4 09-10 (Pa) |

UB-LINE								
Techniniai duomenys	1	2	3	4	5	6	7	8
UB90.060.140.2S	1402 x 574 x 600 mm	1279 x 452 x 502 mm	90	230	300	240	3	1
UB90.060.140.UL2S	1402 x 574 x 600 mm	1279 x 452 x 502 mm	90	230	300	240	3	1
UB90.060.140.050.2S	1402 x 502 x 600 mm	1279 x 382 x 502 mm	90	205	300	240	3	1
UB90.060.140.050.UL2S	1402 x 502 x 600 mm	1279 x 382 x 502 mm	90	205	300	240	3	1
UB90.060.140.S2T	1402 x 574 x 600 mm	1279 x 452 x 502 mm	90	230	300	240	3	1
UB90.060.140.ULS2T	1402 x 574 x 600 mm	1279 x 452 x 502 mm	90	230	300	240	3	1
UB90.060.140.050.S2T	1402 x 502 x 600 mm	1279 x 382 x 502 mm	90	205	300	240	3	1
UB90.060.140.050.ULS2T	1402 x 502 x 600 mm	1279 x 382 x 502 mm	90	205	300	240	3	1
UB90.060.110.2S	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.UL2S	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.050.2S	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.050.UL2S	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.S	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.ULS	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.050.S	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.050.ULS	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.2T	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.UL2T	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.050.2T	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.050.UL2T	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.ST	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.ULST	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	90	180	300	277	2	1
UB90.060.110.050.ST	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.110.050.ULST	1102 x 502 x 600 mm	979 x 382 x 502 mm	90	160	300	278	2	1
UB90.060.089.S	893 x 574 x 600 mm	771 x 452 x 502 mm	90	140	300	313	2	1
UB90.060.089.ULS	893 x 574 x 600 mm	771 x 452 x 502 mm	90	140	300	313	1	1
UB90.060.089.050.S	893 x 502 x 600 mm	771 x 382 x 502 mm	90	125	300	317	1	1
UB90.060.089.050.ULS	893 x 502 x 600 mm	771 x 382 x 502 mm	90	125	300	317	1	1
UB90.060.089.2T	893 x 574 x 600 mm	771 x 452 x 502 mm	90	140	300	313	2	1
UB90.060.089.UL2T	893 x 574 x 600 mm	771 x 452 x 502 mm	90	140	300	313	1	1
UB90.060.089.050.2T	893 x 502 x 600 mm	771 x 382 x 502 mm	90	125	300	317	1	1
UB90.060.089.050.UL2T	893 x 502 x 600 mm	771 x 382 x 502 mm	90	125	300	317	1	1
UB90.060.059.S	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.ULS	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.050.S	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1
UB90.060.059.050.ULS	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1
UB90.060.059.T	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.TR	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.ULT	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.ULTR	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	90	120	300	450	1	1
UB90.060.059.050.T	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1

UB-LINE								
Techniniai duomenys	1	2	3	4	5	6	7	8
UB90.060.059.050.TR	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1
UB90.060.059.050.UL.T	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1
UB90.060.059.050.UL.TR	593 x 502 x 600 mm	470 x 382 x 502 mm	90	110	300	460	1	1
UB30.060.140.2S	1402 x 574 x 600 mm	1279 x 452 x 502 mm	30	230	300	240	3	1
UB30.060.110.5	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	30	180	300	277	2	1
UB30.060.110.2T	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	30	120	300	277	2	1
UB30.060.110.2S	1102 x 574 x 600 mm	979 x 452 x 502 mm	30	180	300	277	2	1
UB30.060.089.5	893 x 574 x 600 mm	771 x 452 x 502 mm	30	140	300	313	2	1
UB30.060.059.T	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	30	120	300	450	1	1
UB30.060.059.S	593 x 574 x 600 mm	470 x 452 x 502 mm	30	120	300	450	1	1
UB90.080.110.060.2T	1102 x 600 x 800 mm	979 x 482 x 702 mm	90	233	300	302	2	1
UB90.080.110.060.2S	1102 x 600 x 800 mm	979 x 482 x 702 mm	90	233	300	302	2	1
UB90.080.110.050.2T	1102 x 502 x 800 mm	979 x 382 x 702 mm	90	185	300	302	2	1
UB90.080.110.075.2T	1102 x 752 x 800 mm	979 x 626 x 701 mm	90	200	300	259	4	5
UB90.080.059.060.T	593 x 600 x 800 mm	470 x 482 x 702 mm	90	143	300	467	2	1
UB90.080.059.060.TR	593 x 600 x 800 mm	470 x 482 x 702 mm	90	143	300	467	2	1
UB90.080.059.060.S	593 x 600 x 800 mm	470 x 482 x 702 mm	90	143	300	467	2	1

K-LINE								
Techniniai duomenys	1	2	3	4	5	6	7	8
K90.060.110.050.UB.ST	1102 x 502 x 601 mm	kairėje: 470 x 380 x 502 mm dešinėje: 440 x 468 x 562 mm	90	155	300	275	2	1
K90.060.110.050.UB.2T	1102 x 502 x 601 mm	kairėje: 470 x 380 x 502 mm dešinėje: 440 x 468 x 562 mm	90	155	300	275	2	1
K90.060.140.050.UB.ST	1402 x 502 x 601 mm	kairėje: 770 x 380 x 502 mm dešinėje: 440 x 468 x 562 mm	90	197	300	236	3	1
K90.060.140.050.UB.3T	1402 x 502 x 601 mm	kairėje: 770 x 380 x 502 mm dešinėje: 440 x 468 x 562 mm	90	197	300	236	3	1

12.2. LENTELĖ „SAUGYKLOS TALPA“

Lentelės „Saugyklos talpa“ paaiškinimai



Sandėliavimo lygių keliamoji galia (kg)







Surenkamas tūris (litrais)



Didžiausias talpyklos tūris spintoje (litrais)

UB-LINE																												
Įrangos atskiros dalys																												
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
UB90.060.140.2S		75				25	50							3/5,5	11,5/20/21												2,5/5	10/18/19
UB90.060.140.UL.2S		75				25	50							3/5,5	11,5/20/21												2,5/5	10/18/19
UB90.060.140.050.2S		75				25	50							2,5/4,5	10/17,5												2/4	9/15,5
UB90.060.140.050.UL.2S		75				25	50							2,5/4,5	10/17,5												2/4	9/15,5
UB90.060.140.UL.S2T	30	75				25	50				20/22			3	11,5											18/20	2,5	10
UB90.060.140.UL.S2T	30	75				25	50				20/22			3	11,5											18/20	2,5	10
UB90.060.140.050.S2T	30	75				25	50				11/16,5			2,5	10											10/15	2	9
UB90.060.140.050.UL.S2T	30	75				25	50				11/16,5			2,5	10											10/15	2	9
UB90.060.110.2S		75				25	50							3	11,5												2,5	10
UB90.060.110.UL.2S		75				25	50							3	11,5												2,5	10
UB90.060.110.050.2S		75				25	50							2,5	10												2	9
UB90.060.110.050.UL.2S		75				25	50							2,5	10												2	9
UB90.060.110.5		75				25	50							7	26/27												6	23/24,5
UB90.060.110.UL.S		75				25	50							7	26/27												6	23/24,5
UB90.060.110.050.S		75				25	50							6	21,5/22,5												5	19,5/20
UB90.060.110.050.UL.S		75				25	50							6	21,5/22,5												5	19,5/20
UB90.060.110.2T	30	75				50					22/25,5			15,5												20/23	14	
UB90.060.110.UL.2T	30	75				50					22/25,5			15,5												20/23	14	
UB90.060.110.050.2T	30	75									21/22															19/20		
UB90.060.110.050.UL.2T	30	75									21/22															19/20		
UB90.060.110.ST	30	75				25	50				11/12			3	11,5											10	2,5	10
UB90.060.110.UL.ST	30	75				25	50				11/12			3	11,5											10	2,5	10

UB-LINE																			
Įrangos atskiros dalys	1 Skyriaus pagrindas					4 Ištraukiamas dėklas					7 Stalčius								
	2 Perforuotas lakštas					5 Ištraukiamo padėklo šalinimas					3 Apatinis surinkimo padėklas					6 Antroji ištraukiama lentyna			
																			
UB90.060.110.050.ST	30	75			25	50			10/11			2,5	10			10		2	9
UB90.060.110.050.ULST	30	75			25	50			10/11			2,5	10			10		2	9
UB90.060.089.S		75			25	50						5,5	20/21					5	18/19
UB90.060.089.ULS		75			25	50						5,5	20/21					5	18/19
UB90.060.089.050.S		75			25	50						4,5	16,5/17,5					4	15/15,5
UB90.060.089.050.ULS		75			25	50						4,5	16,5/17,5					4	15/15,5
UB90.060.089.2T	30	75		50					20/22	23						18/20	20,5		
UB90.060.089.UL.2T	30	75		50					20/22	23						18/20	20,5		
UB90.060.089.050.2T	30	75							11/16,5							10/15			
UB90.060.089.050.UL.2T	30	75							11/16,5							10/15			
UB90.060.059.S		75			25	50						3	11,5					2,5	10
UB90.060.059.ULS		75			25	50						3	11,5					2,5	10
UB90.060.059.050.S		75			25	50						2,5	10					2	9
UB90.060.059.050.ULS		75			25	50						2,5	10					2	9
UB90.060.059.T	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.060.059.TR	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.060.059.UL.T	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.060.059.UL.TR	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.060.059.050.T	30	75							10/11							9/10			
UB90.060.059.050.TR	30	75							10/11							9/10			
UB90.060.059.050.UL.T	30	75							10/11							9/10			
UB90.060.059.050.UL.TR	30	75							10/11							9/10			
UB30.060.140.2S		75			25	50						3/5,5	11,5/20/21					2,5/5	10/18/19
UB30.060.110.S		75			25	50						7	26/27					6	23/24,5
UB30.060.110.2T	30	75		50					22/25,5		15,5					20/23		14	
UB30.060.110.2S		75			25	50						3	11,5					2,5	10
UB30.060.089.S		75			25	50						5,5	20/21					5	18/19
UB30.060.059.T	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB30.060.059.S		75			25	50						3	11,5					2,5	10
UB90.080.110.060.2T	30	75		50					22/25,5		15,5					20/23		14	
UB90.080.110.060.2S		75			25	50						3	25					2,5	22,5
UB90.080.110.050.2T	30	75							21/22							19/20			
UB90.080.110.075.2T		75		60					33	33						30	30		
UB90.080.059.060.T	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.080.059.060.TR	30	75		50	50				11/12	12	15,5/30					10	10,5	14/27	
UB90.080.059.060.S		75			25	50						3	25					2,5	22,5

K-LINE																			
Atskirų dalių įranga (kairėje pusėje)	1 Skyriaus pagrindas					2 Perforuotas lakštas					3 Apatinis surinkimo padėklas								
	4 Stalčius					5 Lentynos ištraukimas													
Atskirų dalių įranga (dešinėje pusėje)																			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
K90.060.140.050.UB.3T	30	75			25			11/16,5		11				10/15					10
K90.060.140.050.UB.ST		75			50	25				11		20						18	10
K90.060.110.050.UB.2T	30	75			25			10/11		11				9/10					10
K90.060.110.050.UB.ST					50	25						20						18	10

